
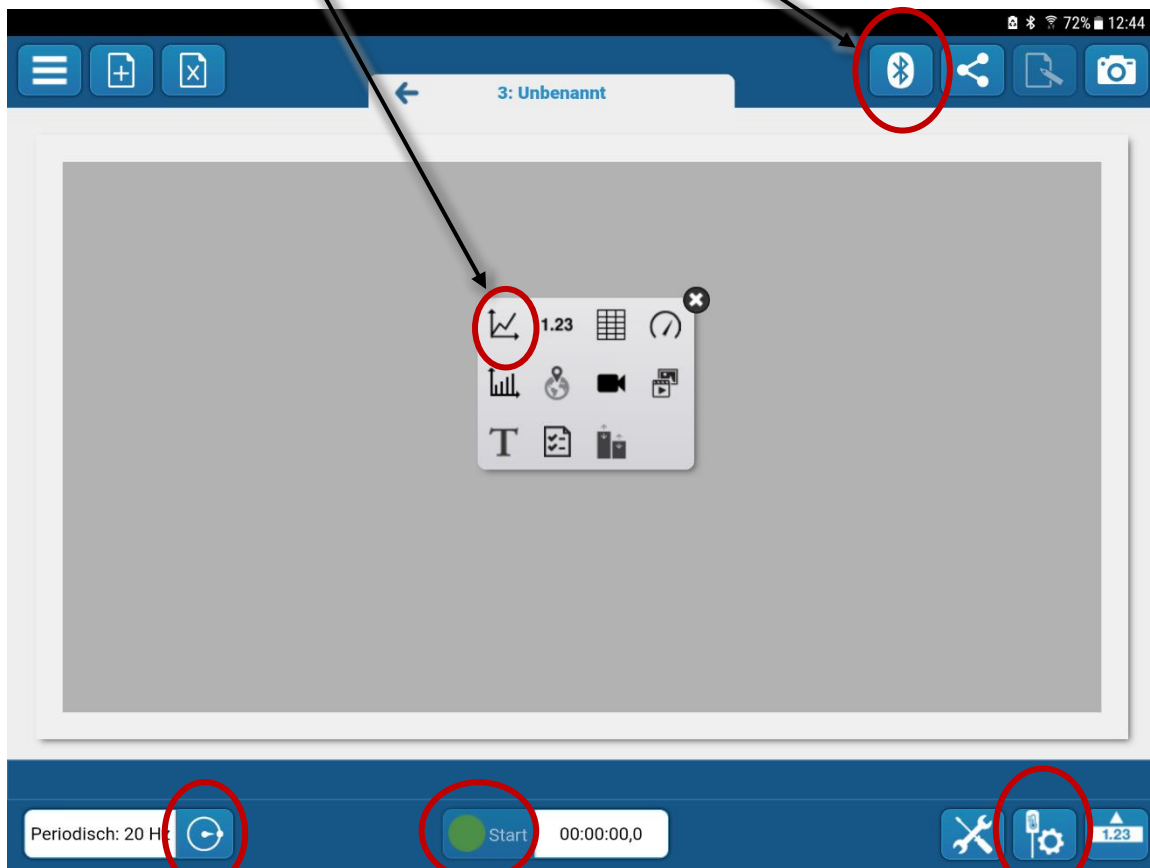



SPARKvue Kurzanleitung

1. „Neues Experiment erstellen“ auswählen
oder falls bereits ein Experiment aktiv ist: Ein neues Registerblatt mit  erzeugen.
2. In der rechten Leiste ein Layout wählen (z.B. das oberste)
3. Mit Bluetooth-Sensoren verbinden:
Nummer des Sensors überprüfen und Sensor auswählen
4. Darstellung (z.B. Graph) wählen,
an der Hochachse gewünschte Größe auswählen



dargestellte Software: <https://www.pasco.com/products/software/sparkvue>

5. Datenrate einstellen
6. Messung starten und stoppen

- Bei Bedarf: Einstellungen zu den Sensoren verändern
- Für das Erstellen einer neuen Messung mit  ein neues Registerblatt erzeugen.

Mit  können nicht mehr benötigte Registerblätter gelöscht werden.